




SISTEMA PARA ANCORAGEM ORTODÔNTICA

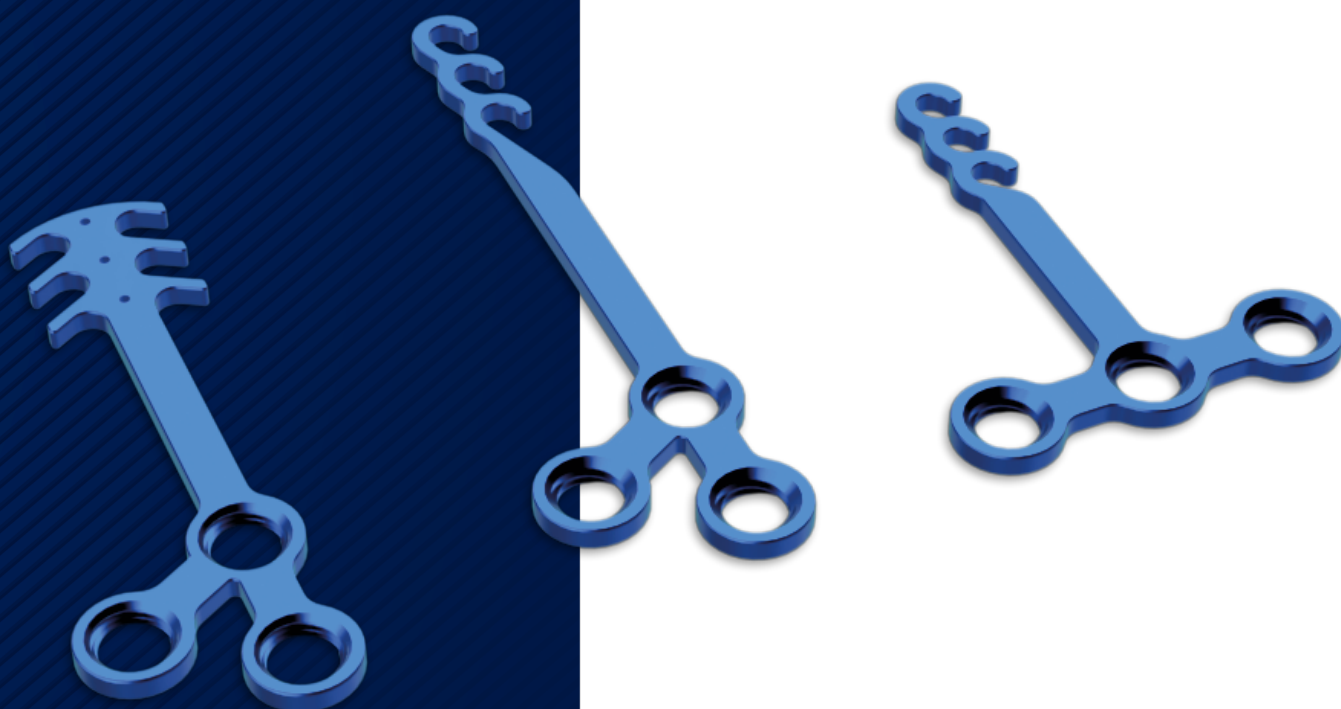

SISTEMA PARA ANCORAGEM ORTODÔNTICA

Registro ANVISA 80455630095



O Sistema para Ancoragem Ortodôntica Traumec, é composto por placas e parafusos de ancoragem. Desenvolvido para ser instalado via intrabucal e usado como fixação nos procedimentos ortodônticos, nos quatro quadrantes da cavidade bucal, permite maior controle tridimensional dos movimentos dentários e um tratamento ortodôntico mais rápido e eficiente.

VANTAGENS DO SISTEMA:


- Fornece uma ancoragem fixa para melhorar o controle da movimentação dentária de forma simultânea ou isolada;
- Possibilita maiores correções ortodônticas;
- Compatível com uma variedade de dispositivos ortodônticos que incluem arcos, elásticos e molas;
- Permite carregamento imediato;
- Elimina/minimiza a necessidade de ancoragem extrabucal;
- Se adapta à anatomia do paciente e a necessidade do caso;
- Pode ser instalado à distância das raízes dentárias;
- Fixação com parafusos de 2,0 mm e 2,3 mm;
- Possui uma variedade de modelos de placas;
- Fixação das placas com 2 ou 3 parafusos;
- Placas fabricadas em titânio comercialmente puro (CP);
- Parafusos em liga de titânio (Ti6Al4Va).

INDICAÇÕES

O versátil Sistema para Ancoragem Ortodôntica Traumec é indicado para movimentos de intrusão e extrusão dentária, mesialização ou distalização dentária, tratamento da mordida cruzada e da mordida aberta anterior, bem como para o fechamento de espaços e controle tridimensional dos arcos dentários.




Sistema para ancoragem ortodôntica

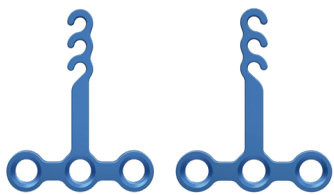


Placa Lockfix 2.0 ancoragem "T"

PA.01.03.2318	curta	direita
PA.01.03.2324	curta	esquerda
PA.01.03.2320	média	direita
PA.01.03.2326	média	esquerda
PA.01.03.2322	longa	direita
PA.01.03.2328	longa	esquerda

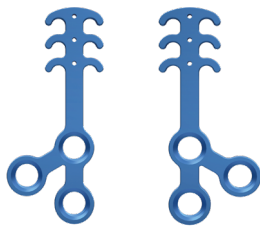


Placa Lockfix 2.0 ancoragem "Y" dupla

PA.01.03.2348	curta	direita
PA.01.03.2354	curta	esquerda
PA.01.03.2350	média	direita
PA.01.03.2356	média	esquerda
PA.01.03.2352	longa	direita
PA.01.03.2358	longa	esquerda

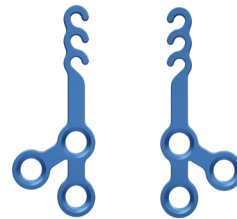

Placa Lockfix 2.0 ancoragem "Y"

PA.01.03.2330	curta	direita
PA.01.03.2336	curta	esquerda
PA.01.03.2332	média	direita
PA.01.03.2338	média	esquerda
PA.01.03.2334	longa	direita
PA.01.03.2340	longa	esquerda

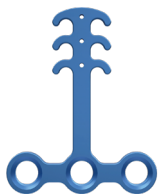

Placa Lockfix 2.0 ancoragem "T" dupla

PA.01.03.2342	curta
PA.01.03.2344	média
PA.01.03.2346	longa

Parafusos

Registro ANVISA 80455630030



Parafuso Cortical AP 2,0-TI Cross Drive

PA.01.03.0256	4mm
PA.01.03.0257	5mm
PA.01.03.0258	6mm
PA.01.03.0260	8mm



Parafuso Cortical AP 2,3-TI Cross Drive

PA.01.03.0092	5mm
PA.01.03.0093	6mm

Instrumentais

Registro ANVISA 80455630104



PA.02.03.0083 Alicete dobrador 1.5 - 2.0



PA.02.03.2747 Cabo engate rápido modelo 1 médio



PA.02.03.0834 Pinça para placas nº 2



PA.02.03.0094 Ponteira Cross Drive 2.0



PA.02.03.0191 Broca Ø1.1 x 100mm com stop 5mm engate J-Latch



+55 19 3522-1177

vendas@traumec.com.br | sac@traumec.com.br | export@traumec.com.br

traumec.com.br

De acordo com a legislação vigente aplicável, o uso deste produto deverá ocorrer sob responsabilidade de profissional habilitado. Imagens meramente ilustrativas. Rev.00 – Jun/2025